




Assurance de stabilité

- **Automatisation:** Calcul de formules avec impression détaillée.
- **Données:** Connexion à USB pour sortie des données à Excel .
- **Solidité:** Corps en aluminium d'une extrême résistance.
- **Vérifiée:** Modèles avec vérification métrologique.
- **Calibration:** Calibration interne intelligente, totalement automatisé à 100%.




► Fonctions:

- **Calcul:** Réalise le pourcentage relatif aux pesées avec une barre graphique en écran.
- **Compte:** Réalise le comptage de pièces grâce aux valeurs de poids préenregistrées.
- **Moyen:** Filtre adapté aux environnements non stables.

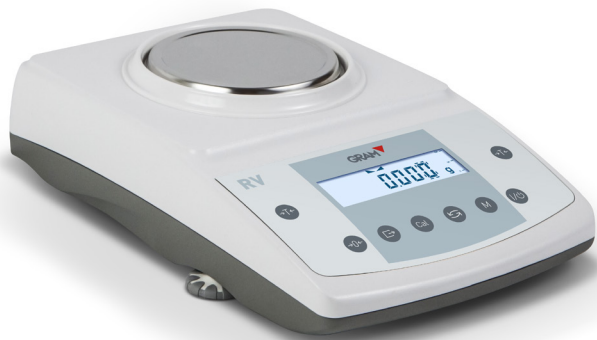

► Applications

La balance Gram RV est une balance très résistante, en acier laminé, pour une utilisation intensive pour tous les types d'industries, les laboratoires de production, et les endroits où une haute précision et fiabilité de pesage est requise.

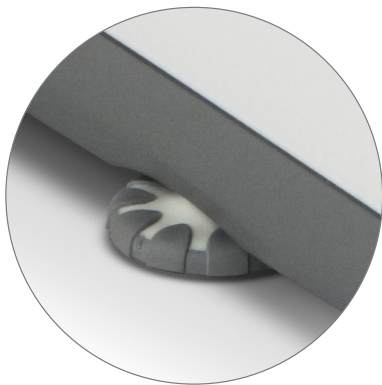

► Pieds réglables

Pieds antidérapants pour assurer un blocage de la balance en horizontal et empêcher son déplacement pendant l'usage.

Modèle	RV-300i	RV-500i	RV-3000i	RV-4000i
Référence	61089	61090	61091	61092
Capacité	300 g	500 g	3000 g	4000 g
Résolution	0,001 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g
Linéarité	+/- 0,003 g	+/- 0,003 g	+/- 0,03 g	+/- 0,2 g
Reproductibilité	+/- 0,002 g	+/- 0,002 g	+/- 0,015 g	+/- 0,2 g
Excentricité	+/- 0,003 g	+/- 0,003 g	+/- 0,03 g	+/- 0,25 g
Temps de lecture	moins de deux secondes			
Alimentation d'énergie	220V / 48-60 Hz			
Température de travail	+0°C / +30°C			
Temps de réchauffement	30 minutes			
Calibration	interna			
Unités de pesage	g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl			
Interface	RS232C, USB			
Humidité de l'air	max 80% sans condensation			
Pesage hydrostatique	no			
Dim. du plateau	115 Ø	165 x 165		
Dim. du produit (mm)	230 x 345 x 90			
Poids net total (kg)	4,5	5		
Dim. de l'emballage (mm)	480 x 335 x 255			
Poids total avec emballage (kg)	5,5	6		
PVP (€)	---	---	---	---



► Display

Display LCD rétroéclairé pour une lecture facile avec grande hauteur de chiffres de 17 mm.



► Connectivité

Connexion à un PC ou imprimante avec sortie RS 232-C. Les données de pesée peuvent être imprimées. Sortie des données USB.


► Protection pare-vents

Cette option permet d'éviter l'instabilité lors de la pesée à cause du vent. De cette manière, le pesage est précis.



Dimensions externes (mm)

RV-300i
RV-500i
RV-3000i
RV-4000i

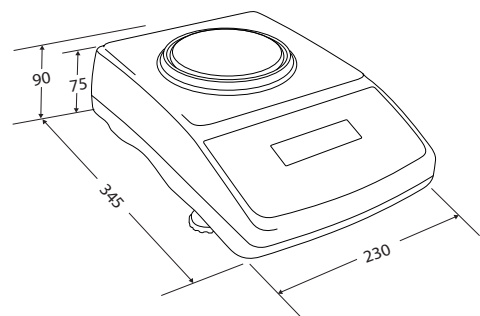

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70036	Imprimante PR6 (RS-232)	---
31902	Para-Vents	---
36759	Câble RS-232 à PC	---
36760	Câble RS-232 à Imprimante	---